


## Способ подзарядки устройства

Пожалуйста, зарядите устройство перед использованием.

Светодиодные индикаторы непрерывно мигают в процессе подзарядки. Они перестанут мигать, когда устройство будет полностью заряжено. Снимите защитную пленку перед первым использованием.

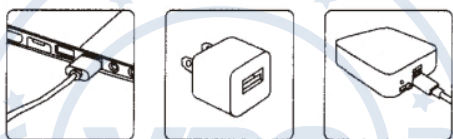

### Примечание

Пожалуйста, зарядите устройство перед использованием.

Для полной зарядки устройства требуется 2-3 часа (5-8 часов перед первым использованием).

При полной зарядке устройство будет работать около 60 минут.

## Инструкции

### Очищение

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд
- 2 Нажмите на кнопку один раз, чтобы выбрать режим очищения [Cleansing]  
Держите ионный проводник за обе стороны, чтобы активировать режим ионизации
- 3 Нанесите на лицо вашу любимую сыворотку
- 4 Перемещайте устройство в направлениях, показанных на Рис. 2



### Увлажнение

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд
- 2 Нажмите на кнопку два раза, чтобы выбрать режим увлажнения [Moisturizing]  
Держите ионный проводник за обе стороны, чтобы активировать режим ионизации
- 3 Нанесите на лицо вашу любимую сыворотку
- 4 Перемещайте устройство в направлениях, показанных на Рис. 2



## Инструкции

### Лифтинг

- 1 Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд
- 2 Нажмите на кнопку три раза, чтобы выбрать режим лифтинга [Lifting]
- 3 Нанесите на лицо вашу любимую сыворотку
- 4 Перемещайте устройство в направлениях, показанных на Рис. 2



### Очистка и хранение

- 1 Убедитесь, что устройство выключено
- 2 Очистите устройство ватными дисками или мягкой тканью  
НЕ используйте химические вещества или растворители для очистки устройства
- 3 Храните устройство в сухом и прохладном месте  
НЕ храните устройство во влажном помещении, например, в ванной. Храните в недоступном для детей месте

## Аппарат для ультразвуковой чистки кожи



### Руководство пользователя

**VBG** | COSMETIC

## Информация об устройстве



Ультразвуковая головка

Ионный проводник

Индикатор состояния

Кнопка включения и смены режимов

Разъем USB для зарядного устройства

Другие аксессуары • Инструкция по применению • Провод USB для подзарядки устройства

## Описание устройства

Ультразвук – это высокочастотные механические колебания и волны, которые широко применяются в медицине и косметологии. Механическая волна оказывает механическое, тепловое и каталитическое воздействие. Она может оказывать на кожу мягкий резонансный эффект при низкой энергии и высокой частоте колебаний, повышать жизнеспособность клеток и проницаемость всех кортикальных тканей, очищать потовые железы и сужать поры.

Этот ультразвуковой аппарат для очищения кожи и других косметологических процедур разработан с использованием нанотехнологий. Колебания проникают глубоко в кожу, создавая интенсивное трение между молекулами (24000 ударов в секунду), повышая температуру, активизируя клеточный метаболизм, ускоряя микроциркуляцию крови и восстанавливая кровоток в сосудах кожи. Благодаря трансформационному действию потока ионов увеличивается проницаемость клеточной мембраны, стимулируя внутриклеточный поток протоплазмы, улучшая проникновение жирных кислот и воды в клетки, уменьшая выделение углекислого газа, а также усиливая действие косметических средств.

Высокочастотные вибрации воздействуют на глубокие слои кожи, улучшая микроциркуляцию, сжигая жировые клетки и разрушая продукты метаболизма, чтобы достичь желаемого эффекта. Специальный зонд в форме лопатки позволяет ультразвуковым колебаниям проникать в кожу на глубину 4-7 мм, эффективно доставляя туда косметические средства. Кроме того, ультразвук удаляет из пор загрязнения, излишки кожного сала и остатки макияжа без разбрызгивания, ускоряя очищение кожи и повышая его эффективность. Эффективность прибора сравнима с воздействием прецизионного профессионального аппарата для ультразвуковой чистки кожи. Прибор удаляет омертвевшие клетки кожи, кожное сало, акне и т. д., очищая поры и способствуя лучшему поглощению питательных веществ вашей кожей.

## Особенности устройства

- 1 Очищает и успокаивает кожу, придавая ей сияние
- 2 Повышает эластичность кожи
- 3 Стимулирует кровообращение
- 4 Повышает регенерирующую способность клеток кожи
- 5 Помогает коже лучше впитывать ингредиенты сывороток
- 6 Не повреждает кожу и не имеет побочных эффектов
- 7 Элегантный дизайн
- 8 Компактное и удобное в использовании

## Технические параметры устройства

**Наименование продукта:** Аппарат для ультразвуковой чистки кожи  
**Питание:** 100-240 В перем. тока 50/60 Гц  
**Выходное напряжение:** 5 В/600 мА  
**Режим заряда:** многократно подзаряжаемый (литиевая батарея)  
**Вес нетто:** около 99 г  
**Мощность:** 2 Вт  
**Размеры:** 173\*55\*15,5 мм

## Распространенные проблемы

Проблемы	Анализ причины	Решение
Устройство не включается	Устройство незаряжено Недостаточный заряд батареи	См. раздел «Способ подзарядки устройства»
Устройство выключается во время использования	Устройство автоматически выключается спустя 20 мин использования Низкий заряд батареи, издает звуковой сигнал	Устройство работает нормально, неисправностей нет См. раздел «Способ подзарядки устройства»
Устройство не заряжается	К разъему USB не подсоединено зарядное устройство Для подзарядки прибора используется зарядное устройство от мобильного телефона Неисправность зарядного устройства Неисправность адаптера (продается отдельно)	Подсоедините провод USB для подзарядки устройства Замените зарядное устройство Перезапустите зарядное устройство Используйте другие зарядные устройства

ООО «Восток Бизнес Групп»  
 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2.  
 Бизнес-парк Рузнецово, корпус Г, офис 509Г.  
 +8 (800) 200-57-09  
 +7 (495) 113-40-58  
 www.vbg-cosmetic.ru