

Dr. pen
Auto Microneedle System

VBG | RUSSIA | **COSMETIC**

ПРОТОКОЛ

ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ
НА АППАРАТЕ
ДЕРМАПЕН DR.PEN

ГАЙД ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОЦЕДУРЕ
И УХОДУ ПОСЛЕ НЕЁ



VBG-COSMETIC.RU

Отсканируйте для перехода в каталог товаров DR.PEN:

WILDBERRIES

OZON

Яндекс  Маркет

Dr. pen
Auto Microneedle System

VBG | COSMETIC



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР БРЕНДА DR.PEN В РОССИИ

ПРОТОКОЛ МТС-УХОДА

процедуры фракционной мезотерапии / микронидлинга

это перечень рекомендаций, которых стоит придерживаться, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время сеанса и после него

ПЕРВАЯ ОСНОВНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

процедуру мезотерапии с помощью аппарата дермапен стоит выполнять в среднем не чаще одного раза неделю

КУРС ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

с помощью аппарата дермапен
стоит выполнять не чаще одного раза в 1,5-2 месяца

КУРС МЕЗОТЕРАПИИ

составляет **7-10 процедур**

Для достижения более стойкого эффекта и максимального депонирования активных веществ назначается курс минимум от 6-8 процедур

ЧАСТОТА ПРОЦЕДУР

опционально может варьироваться в зависимости:

- от типа и состояния кожи
- обрабатываемой зоны
- используемых количества и длины игл
- от применяемых в процессе мезококтейлей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧАСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

НАНО ИГЛЫ1 РАЗ В 1-3 ДНЯ

ИГЛЫ ДЛИНОЙ 0,25 – 0,3 ММ.....1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

ИГЛЫ ДЛИНОЙ 0,5 ММ1 РАЗ В НЕДЕЛЮ

ИГЛЫ БОЛЕЕ 1 ММ.....1 РАЗ В 2 НЕДЕЛИ ДЛЯ ЛИЦА
И 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ДЛЯ ТЕЛА

**ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
НА СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
И СОСТОЯНИЕ КОЖИ**

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ПРИ ДОЛГОМ ЗАЖИВЛЕНИИ
сроки между процедурами могут быть увеличены,
а скорость и длина иглы – уменьшены

**ПРИ ПЛОТНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕ
И БЫСТРОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ**
сроки между процедурами могут быть уменьшены,
а выход иглы увеличен

ПЕРЕД МЕЗОТЕРАПИЕЙ:

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ

приёма противовоспалительных препаратов или таблеток с рыбьим жиром, а также употребления алкоголя в течение трёх дней перед процедурой микронидлинга. Это поможет свести к минимуму кровоточивость

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- **АППАРАТ ДЕРМАПЕН DR.PEN**
- **ЧИСТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ**
- **ОДНОРАЗОВЫЙ КАРТРИДЖ НАСАДКА**
- **СПИРТОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ САНИТАЙЗИНГА (СТЕРИЛИЗАЦИИ) ИЛИ ХЛОРГЕКСИДИН**
- **ВАТНЫЕ ДИСКИ**
- **АМПУЛЬНАЯ СЫВОРОТКА «МЕЗОКОКТЕЙЛЬ»**
- **ЧИСТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ (ПО НЕОБХОДИМОСТИ)**
- **В РЕДКИХ СЛУЧАЯХ, ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЙ КРЕМ (ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОСМЕТОЛОГА И ПРИ ОТСУТСТВИИ АЛЛЕРГИИ НА НЕГО)**

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ:

- Завяжите волосы сзади и уберите их с лица.
Тщательно, при необходимости дважды, очистите кожу выбранными вами средствами для снятия макияжа и умывания. Любая грязь, жир или выбившиеся волоски, которые коснутся вашего лица в процессе процедуры, могут увеличить риск раздражения или инфекции
- При желании, по назначению косметолога и при отсутствии аллергии на него - нанесите обезболивающий крем.
В большинстве случаев предварительное обезболивание перед MTS-уходом не требуется. Но если вы решили воспользоваться обезболивающим кремом, мы рекомендуем использовать кремы, содержащие не менее 5% лидокаина.
Нанесите крем на область, где вы будете делать микроиглы, и оставьте на коже на 20-30 минут. Затем необходимо удалить крем и еще раз тщательно очистить кожу в зоне воздействия.
Используйте крем с лидокаином, если вы использовали данное обезболивающее средство ранее и у вас не было на него аллергии. Приобретайте данный крем только в аптеке по рекомендации врача косметолога.
Используйте 60%-ный спирт, смешанный с очищенной водой, или 0,1%-ный раствор хлоргексидина, чтобы стереть остатки обезболивающего крема. Удаление обезболивающего крема гарантирует, что он не попадет в микроканалы, которые вы создаете во время процедуры.
- Убедитесь, что устройство полностью заряжено. Или будьте рядом с источником питания для работы от сети.
- Подготовьте рабочую зону: простерилизуйте дерма ручку и поверхность стола, которую вы используете. И держите спирт под рукой.
Если во время процедуры вы прикоснетесь к бутылочке с сывороткой, щётке или чему-либо ещё, кроме вашей кожи и устройства, это может привести к перекрестному загрязнению.
Мы считаем, что проще налить немного сыворотки в миску и наносить ее кисточкой во время процедуры, чтобы сделать процесс более легким и гигиеничным

ПРОЦЕДУРА МИКРОНИДЛИНГА:

1 Нанесите мезо сыворотку на обрабатываемый участок, так чтобы кожа была хорошо ею смазана. Сыворотка помогает иглам легко скользить по коже.

Мы не рекомендуем использовать витамин С*, ретинол, эксфолианты или другие осветляющие ингредиенты до, во время и после процедуры, так как они могут вызвать раздражение.


* тем не менее существуют мезококтейли с витамином С, которые по рекомендации их производителя могут быть использованы для MTS при глубине работы игл 0.25 ~ 0.5 мм

2 Убедитесь, что ваши руки чистые. Вы можете надеть медицинские перчатки, если считаете, что так безопаснее. Откройте новый картридж и установите его в аппарат. Не прикасайтесь к кончикам игл

3 Выберите желаемую глубину иглы на корпусе дермапена. С рекомендациями по выбору настроек можно ознакомиться ниже. Учитывайте тип кожи, которую вы обрабатываете. Более толстая кожа (например, зрелая кожа, растяжки, рубцовая ткань) может потребовать немного большей глубины для достижения оптимальных результатов




ДЛИНА ИГЛЫ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ
(ММ)

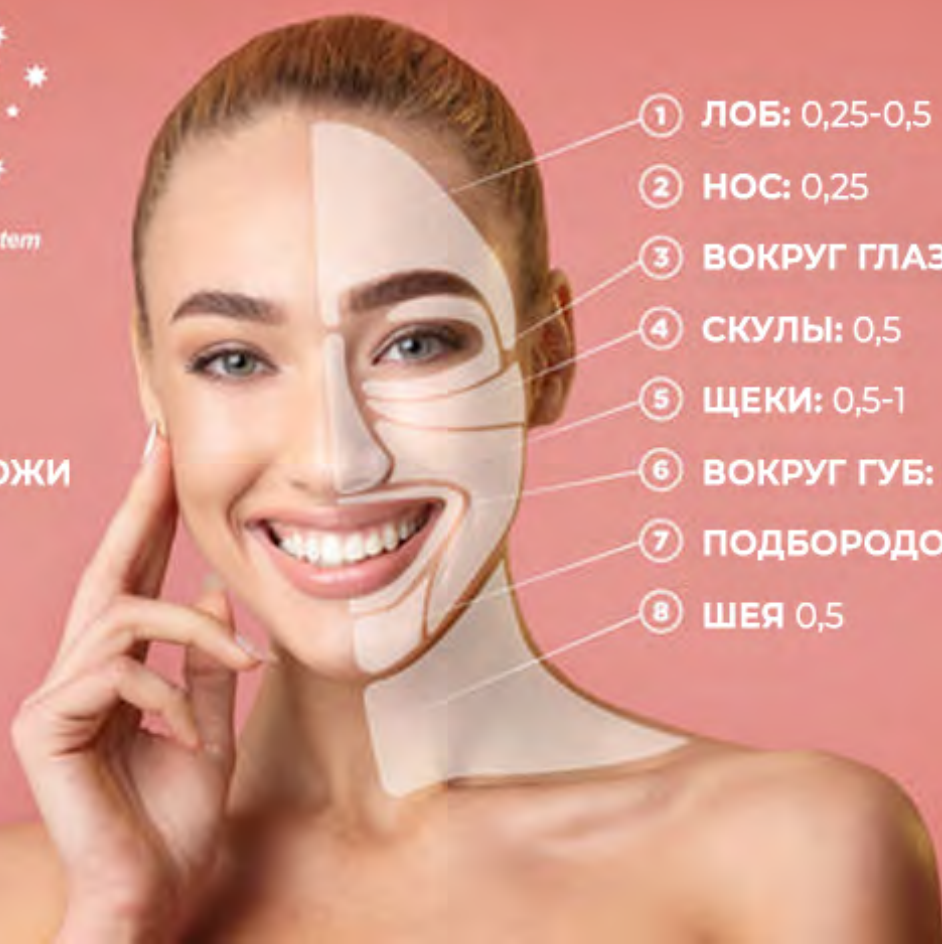

- ① ЛОБ: 0,25-0,5
- ② НОС: 0,25
- ③ ВОКРУГ ГЛАЗ: 0,25
- ④ СКУЛЫ: 0,5
- ⑤ ЩЕКИ: 0,5-1
- ⑥ ВОКРУГ ГУБ: 0,25
- ⑦ ПОДБОРОДОК: 0,5
- ⑧ ШЕЯ 0,5

ПРОЦЕДУРА МИКРОНИДЛИНГА:

- 4** Обрабатывайте небольшие участки, нанося сыворотку на кожу непосредственно перед проходом аппаратом. Рекомендуемая схема перемещения ручки - вертикальная, горизонтальная, затем диагональная в обоих направлениях. Мы рекомендуем работать в виде сетки, чтобы вы точно знали, где вы провели ручкой, а где нет. Слегка надавливайте, а свободной рукой держите кожу натянутой. Плавно проводите аппаратом по поверхности кожи по направлению массажных линий. Каждый проход должен "захлестывать" предыдущий, чтобы не допустить образования необработанных участков. Рекомендуется начинать работу с менее чувствительных областей, например, со лба, для того, чтобы вы или ваш клиент привыкли к ощущениям. Обработка периорбитальной области осуществляется по костному краю. Проход по каждой зоне повторяется 2-4 раза.

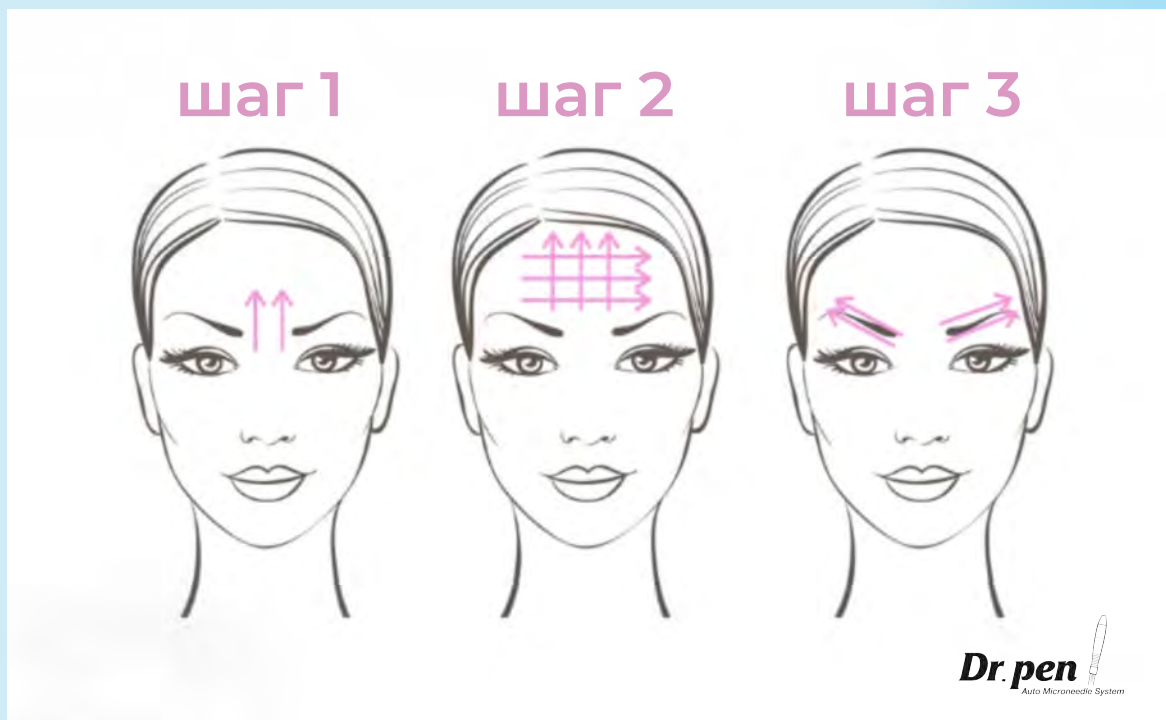

- 5** После завершения работы в одной области необходимо повторно нанести мезококтейль и втереть его в кожу легкими круговыми движениями.
- 6** При проведении микронидлинга важно помнить, что для разных участков лица потребуется немного разная техника.

КАРТИРОВАНИЕ ЛИЦА: комбинирование техник

НЕКОТОРЫЕ УЧАСТКИ ЛИЦА БОЛЕЕ МЯСИСТЫЕ, В ТО ВРЕМЯ КАК У ДРУГИХ КОЖА БОЛЕЕ ТОНКАЯ И НЕЖНАЯ.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНА РАЗБИВКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДВИЖЕНИЙ МИКРОИГЛАМИ ДЛЯ КАЖДОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦА

МЕЖДУ БРОВЯМИ

В этой области обычно имеются глубокие морщины.

Для этого используйте небольшие крест-накрест движения дерма ручкой, работая только в направлении вверх. Держите кожу между бровями натянутой и равномерно надавливайте при прохождении дермапеном

ЛОБ

Снова используйте крест-накрест, чередуя поглаживания снизу-вверх. Продолжайте равномерно надавливать; если у вас дряблая кожа, обязательно держите её натянутой

ОБЛАСТЬ БРОВЕЙ

Свободной рукой держите кожу натянутой, слегка оттягивая кончик брови наружу. Аккуратно проведите ручкой вверх по надбровной дуге

ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕРМАПЕНОМ УЧАСТКОВ ТЕЛА (НАПРИМЕР, НОГ ИЛИ КИСТЕЙ)

избегайте прокалывания костных частей (особенно на ногах).

Убедитесь, что для микронидлинга тела используются только картриджи с 36 - 42 иглами. Что касается глубины введения иглы, рекомендовано использовать 0,5 мм для ног и до 1,5 мм для участков с более широким слоем подкожно-жировой клетчатки

СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

- Если вы хотите умыться, используйте тёплую воду. Немедленно нанесите гиалуроновую кислоту на обрабатываемый обработанный участок, чтобы обеспечить увлажнение и успокоить кожу. Вместо гиалуроновой кислоты в конце процедуры рекомендуется нанести на лицо успокаивающий гель или маску, которые снимут гиперемию и ускорят процесс регенерации.
- Совершенно нормально испытывать покраснение, отёк и точечное кровотечение после процедуры микронидлинга. Беспокоиться не о чем, поскольку такая реакция нормальна.
- Избегайте занятий спортом / потоотделения или нанесения макияжа в течение 24 часов.
- При выходе на улицу необходимо нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты.
- Если вам приходится краситься, используйте средство для макияжа, специально разработанное для чувствительной кожи или для использования после процедуры, чтобы избежать раздражения.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ПОСЛЕ MTS-УХОДА

Вы можете умыть лицо мягким моющим средством и нанести питательный увлажняющий крем. Избегайте продуктов, содержащих отдушки, активные ингредиенты (витамин С, витамин А, ретинол), кислоты (АНА, ВНА, молочная), физические скрабы и тоники, которые могут раздражать кожу.

На этом этапе у вас могут появиться небольшие отёки, шелушение, синяки и шелушащаяся кожа. Чтобы свести к минимуму эти эффекты, поддерживайте кожу увлажненной. Увлажнение также уменьшит шелушение и снимет чувство стянутости.

Избегайте физических упражнений, чрезмерного потоотделения, плавания или нанесения макияжа в течение первых 24 часов. При выходе на улицу необходимо использовать солнцезащитный крем с высокой степенью защиты и избегать длительного пребывания на солнце

ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ MTS-УХОДА

При необходимости, но не обязательно: если у вас сухая и шелушащаяся кожа, вы можете мягко отшелушить её, чтобы ускорить восстановление. Не используйте химические или агрессивные физические средства для отшелушивания; выбирайте мягкую мочалку / спонж.

А если ваша кожа чувствительна - пока не проводите отшелушивание; оно скоро пройдет. Продолжайте увлажнять кожу два раза в день

ЧЕРЕЗ 3-5 ДНЕЙ ПОСЛЕ MTS-УХОДА

Ежедневно наносите солнцезащитный крем с высокой степенью защиты, избегайте прямых и продолжительных солнечных лучей.

Сосредоточьтесь на увлажняющих средствах и избегайте активных ингредиентов, скрабов, кислот и тоников

СПУСТЯ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ MTS-УХОДА

Вернитесь к своему обычному уходу за кожей

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Как выбрать картридж для дермапена?*

КОЛИЧЕСТВО ИГЛ В КАРТРИДЖЕ ВЛИЯЕТ НА ДИАМЕТР ПРОКОЛОВ, КОТОРЫЕ ОНИ СОВЕРШАЮТ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ АППАРАТА. ЧЕМ МЕНЬШЕ ИГЛ НА НАСАДКЕ КАРТРИДЖА, ТЕМ БОЛЬШИЙ ПРОКОЛ В ДИАМЕТРЕ КАЖДАЯ ИЗ НИХ ПРОИЗВОДИТ, И ТЕМ БОЛЬШЕ ТРАВМИРУЕТСЯ КОЖНЫЙ ПОКРОВ.

СООТВЕТСТВЕННО: ЧЕМ МЕНЬШЕ ИГЛ – ТЕМ ГЛУБЖЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРОНИКАЕТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ КОЖИ МЕЗОКОКТЕЙЛЬ СЫВОРОТКА, НО И ПРОЦЕДУРА ПРОИСХОДИТ ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ ОЩУТИМО И ЖЕСТКО В ПЛАНЕ БОЛЕВОГО ЭФФЕКТА. ПОЭТОМУ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕННОЙ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ КАРТРИДЖ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ИГЛ.

КАРТРИДЖИ 12 ИГЛ

Игл мало, работает жестче, поэтому лучше подходит для возрастной и уплотненной, толстой кожи. Для ухода за такими кожными несовершенствами как различного рода рубцы (акне, растяжки, шрамы, ожоговые участки рубцовой ткани и тп). Также используются для борьбы с глубокими морщинами и заломами кожи. Подходят для агрессивного экспресс омоложения женщин с высоким болевым порогом. Для борьбы с пигментацией. Насадки лучше всего способствуют проникновению более вязких составов. Но и по ощущениям они самые травматичные

КАРТРИДЖИ 24 ИГЛЫ

Можно выбрать, если 12 игл не подошли из-за повышенной чувствительности. Работает мягче и менее болезненно. Существенных различий по структуре проколов и их эффективности в подаче состава в кожу нет. Они также подойдут для ухода и для профилактики процессов старения кожи, особенно - при низком болевом барьере.

КАРТРИДЖИ 36 ИГЛ

Сравнительно с предыдущими насадками у такого картриджа уже более уплотненные многочисленные ряды игл, проникающая способность которых соответственно более снижена. Болевое воздействие еще меньше. Подходит для тонкой молодой кожи при обще омолаживающих, профилактических процедурах против первых морщин или для восприимчивой, чувствительной кожи, которой не подошли насадки с 12 или 24 иглами. Эффективны в борьбе с потерей волос, при облысении (алопеции) у мужчин и женщин, способствуют росту волос на голове, сокращают выпадение волос.

КАРТРИДЖИ 42 ИГЛЫ

Хорошо подходят для увлажняющих и биоревитализационных процедур против стянутости любого типа кожи, можно использовать в области вокруг глаз. Эффективны при использовании в борьбе с целлюлитом на теле и по телу, а также для омоложения зоны декольте, рук.

КАРТРИДЖИ НАНО

Используются для процедуры VV GLOW и поверхностного «вбивания» сывороток.

*** ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛИН И КОЛИЧЕСТВА ИГЛ НОСИТ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ТЕСТОВЫЕ ПРОБЫ НА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКАХ ПОМОГУТ ВЫРАБОТАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН MTS-УХОДА**

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МЕЗОКОКТЕЙЛИ – СЫВОРОТКИ ДЛЯ МИКРОНИДЛИНГА

MATRIGEN – КОСМЕЦЕВТИКА ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ



ЛИНИЯ EXTRA SPECIAL REPAIR AMPOULE (E.S.R)

Ампулы в объемах 10 и 50 мл разработаны для индивидуального ухода за кожей изнутри в соответствии с ежедневно меняющимся состоянием кожи. Оснащены шприцевыми аппликаторами для долгосрочного гигиеничного и удобного использования.



ЛИНИЯ FLUID AMPOULE

Ампульные сыворотки – флюиды по 2 мл в комплектах по 20 и 5 шт. Усиливают действие дермапена и помогают проникать высокоплотному материалу глубже в кожу, в результате чего активный ингредиент регенерирует клетки кожи



ЛИНИЯ VI-PHASE AMPOULE

Двухфазные ампульные сыворотки двойного действия 2 в 1 со смешанными в оптимальном соотношении компонентами на водной и эфирно масляной основах. Серумы с лёгким и обволакивающим распределением по коже при нанесении.



ЛИНИЯ SKIN REJUVENATION SYSTEM (SRS)

Ампулы с полипептидами и различными ингредиентами пептидной ленты благотворно влияют на структуру и ткани кожи. Быстро впитываются и лучше держатся на поверхности при использовании также технологий ионофореза или электропорации.

ОТСКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К КАТАЛОГУ ТОВАРОВ MATRIGEN:

WILDBERRIES

OZON

Яндекс  Маркет

**мега
маркет**



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МЕЗОТЕРАПИИ:

- НАРУШЕНИЯ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
- ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
- НЕВУСЫ, БОРОДАВКИ, ПАПИЛЛОМЫ ОБХОДИМ
- РОЗАЦЕА
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ЛИХОРАДОЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ
- ТРОМБОФЛЕБИТ (В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ)
- ОСТРЫЕ ГНОЙНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ
- БЕРЕМЕННОСТЬ, ЛАКТАЦИЯ


VBG-COSMETIC

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР АППАРАТОВ ДЕРМАПЕН DR.PEN
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРЕЙСКОЙ КОСМЕТИКИ

НАШИ АККАУНТЫ:



В КОНТАКТЕ:

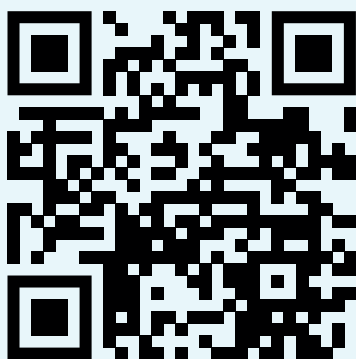

ТЕЛЕГРАММ:



YOUTUBE:



ЧИТАЙТЕ НАШИ НОВОСТИ
О K-BEAUTY НА ПОРТАЛЕ WB GURU:

