

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Несоблюдение следующих правил может привести к травмам или к повреждению прибора.

В следующих случаях перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом:

Детям до 18 лет использование прибора не рекомендуется.

Склонность к аллергии, чувствительность кожи к воздействию металла.

Пациенты с заболеваниями лицевого нерва.

Дерматит в результате использования косметики, дерматит из-за чрезмерного действия солнечных лучей.

Симптомы раздражения, сопровождающиеся зудом и физическим дискомфортом.

Не допускается проведение процедур следующим лицам:

Пациенты с носимыми медицинскими приборами, электронными устройствами или металлическими элементами в организме.

Беременные, лица с заболеваниями сердца, с нарушениями зрения, с инфекционными заболеваниями, страдающие параличом лицевого нерва.

Лица с расширением капилляров, например, при дисфункции печени.

Лица, проходящие процедуры с использованием кардиопульмональных устройств, прибора для снятия ЭКГ, другого электронного медицинского оборудования.

Соблюдайте следующие правила для того, чтобы сохранить прибор в рабочем состоянии.

Не допускается использовать прибор не по назначению, так как это может привести к его поломке и к несчастным случаям.

Храните в недоступном для детей месте.

Не допускается ставить тяжелые предметы или проливать воду на собранный прибор или на его части.

Не разбирайте прибор и не вносите изменений в его устройство. Не прикасайтесь к прибору влажными руками и не погружайте его в воду.

При подключении шнура питания к сетевой розетке держите в руке штепсель, а не шнур питания.

Берегите устройство от сильных ударов, не допускайте его падения.

Существует риск удара током.

Аппарат предназначен для проведения процедур по уходу за кожей; не допускается использовать прибор в любых иных целях.

Не допускается погружать в воду, а также хранить его во влажном месте.

Не допускается хранить прибор в жарких, влажных или пыльных местах.

Не вынимайте штепсель из сети влажными руками, поскольку в этом случае возникает риск удара электрическим током или короткого замыкания.

Существует риск возгорания или ожогов.

В случае сбоя в работе выключите прибор, отключите питание; не разбирайте прибор самостоятельно, не вносите конструктивных изменений и не ремонтируйте самостоятельно.

Использование прибора не рекомендуется людям с сухой кожей.

Перед использованием, тщательно очистите кожу.

После использования прибора очистите его, протрите насадку и уберите для хранения.

### Спецификация:

Название продукта: 5D COSMETIC INTRODUCTION INSTRUMENT

Вес изделия: 245 г

Потребляемая мощность: 5V 1A

Цвет: белый

Способ зарядки: Док-станция

Размер изделия: 65\*120\*210 мм

Советы по использованию и способы применения см. на [www.vbg-cosmetic.ru](http://www.vbg-cosmetic.ru)

### Комплектация:

1 \* Устройство

4 \* Пустая ампула

1 \* USB кабель для зарядки

1 \* Зарядная станция – подставка

1 \* Руководство по эксплуатации

Дистрибутор в РФ: ООО «ВБГ Косметик», 108811, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й, ДВЛД 4, стр. 2 оф: 509Г, +7 (495) 532-03-23



[www.vbg-cosmetic.ru](http://www.vbg-cosmetic.ru)


# MEZONICA

Аппарат для микротокового лифтинга лица.  
Решение для повседневного ухода за кожей



## 5D COSMETIC INTRODUCTION INSTRUMENT

**VBG | COSMETIC**

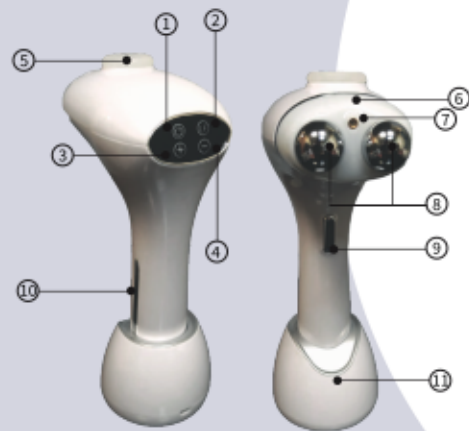

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Кнопка Включения/Выключения | 7. Распылитель                     |
| 2. Кнопка LF                   | 8. Рабочая поверхность             |
| 3. Кнопка +                    | 9. Кнопка для активации распыления |
| 4. Кнопка -                    | 10. Место хвата                    |
| 5. Место для ампулы            | 11. Разъем зарядки                 |
| 6. Светодиодный индикатор      |                                    |

#### ЗАРЯДКА

- Для зарядки устройства, подключите зарядную базу (№11) к сети питания.
- Вставьте устройство в зарядную базу (№11)
- По завершению зарядки, отключите зарядную базу (№11) от сети или снимите устройство с базы.



#### Инструкция

##### 1. Режим Микротоки

Что бы включить режим микротоков, включите устройство (Кнопка 1). Данный режим работает сразу. Изменение интенсивности происходит на кнопки «+» (Кнопка 3) и «-» (Кнопка 4). При достижении конечного значения, вы услышите длинный сигнал. При использовании данной функции, не забывайте нанести на кожу средство - проводник (гель, сыворотка).

##### 2. Режим Светотерапия

Для запуска этого режима, на включенном аппарате, нажмите кнопку LF (Кнопка 2). Изменение интенсивности происходит на кнопки «+» (Кнопка 3) и «-» (Кнопка 4). При достижении конечного значения, вы услышите длинный сигнал. При повторном нажатии на кнопку LF, происходит смена света.

##### 3. Режим Барофореза

Наполните стеклянную ампулу жидкой (не гелевой и не гелеобразной) сывороткой. Переверните аппарат и надежно зафиксируйте ампулу в специальном отверстии для ампулы (№5 на рисунке). Убедитесь, что ампула установлена плотно. Для того что бы начать распыление, нажмите ОДИН раз на Кнопку распыления, расположенную на ручке устройства (Кнопка 9). Для увеличения интенсивности, повторно нажмите на данную кнопку. После использования наберите в пустую, чистую ампулу теплой воды и повторно установите в аппарат, распыляйте ее на протяжении 30 секунд, что бы очистить проток от сыворотки и предотвратить его засорение.

## СВЕТОДИОДНАЯ ТЕРАПИЯ

### BEAUTY TYPE 4: COLOR LIGHT THERAPY

Penetration into the skin to calm the keratin management has a good effect



#### КРАСНЫЙ СВЕТ

- Проникает в дерму кожи на 2-3 мм, оказывает влияние на текстуру и эластичность кожи;
- Повышение всех обменных процессов - коллагено индукция с сочетанием интенсивного разогрева. Эффективная борьба с возрастными изменениями, лифтинг эффект.



#### ЗЕЛЕНый СВЕТ

- Нормализация процессов и активация защитных функций кожи;
- Короткие, но частные импульсы.



#### СИНИЙ СВЕТ

- Проникает до 1 мм и оказывает успокаивающее влияние на кожу;
- Длительные, но редкие импульсы.



Функция автоматического распыления сывороток

Нано спрей с двумя уровнями интенсивности активно распределяет активную-контактную сыворотку



Эффект ионофореза  
На аппарате размещен замыкающий электрод, при проведении процедуры, распыляемая сыворотка активно проникает в кожу



Используйте микротоки и сыворотки одновременно, для лучшего эффекта



Функция светодиодной терапии