

bio roller® G10 Инструкция

Что такое bio roller G10?

Bio roller G10 - это набор роликов со съёмными сменными головками, решающий целый комплекс проблем кожи. Важно отметить, что он имеет специальный дезинфицирующий резервуар, Bio roller G10 изготовлен из множества высококачественных микроигл, которые безболезненно перекатываются и проникают в верхние слои кожи. Это революционное устройство имеет два основных преимущества. Стимулирует выработку коллагена, что значительно улучшает внешний вид шрамов, заломов и морщин, растяжек и рубцов от угревой сыпи. Роллеры позволяют впитываться кремам, гелям и маслам гораздо более эффективно. Это также усиливает эффект при лечении от выпадения волос и уменьшении целлюлита.

bio roller G10 решает следующие проблемы:

Возрастная кожа / Морщины / Гиперпигментация / Растяжки / Выпадение волос / Восстановление волос / Целлюлит / Удаление шрамов - в том числе удаление рубцов от акне



Ледяной ролик
Для охлаждающего массажа кожи



Резервуар для дезинфекции
Для стерилизации насадки



Ролик - ёжик
Для массажа кожи



Двойной нефритовый ролик
Для массажа кожи



720 Игл
Для ухода за кожей лица

1.0 mm



Силиконовая щетка
Для очищения кожи



300 Игл
Для ухода за кожей вокруг глаз

0.5 mm



Ложка для косметических средств
Для нанесения эссенции на кожу



27 Игл
Для точечного ухода за кожей


1.5 mm



Стальной шар
Для точечного массажа кожи

G10 Поставляется с различными сменными роликовыми головками. Пожалуйста, замените соответствующую роликовую головку в соответствии с процедурой.

- Вставьте ручку в насадку, направляя Т-образную защелку на ручке на треугольную отметку на насадке. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать насадку или против часовой стрелки, чтобы ее снять, [Рис 1]

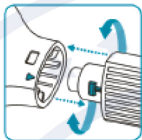

[Рис 1]



[Рис 2]

Работа массажного ролика

- Перед процедурой мезотерапии помассировать кожу роликом-ежилом, двойным нефритовым валиком или стальным шариком.

Работа микроигльчатого ролика и ледяного ролика

- Поместите насадку на 5-8 минут в 75% спирт в ёмкости для дезинфекции. [Рис 2]
- Очистите кожу силиконовой щеткой. Используйте ложку для эссенции для дозирования и предотвращения загрязнения косметического средства.
- На лице используется роликовая насадка на 720 игл. Роликовая насадка на 300 игл используется для контура вокруг глаз. Прокатите ролик вперед и назад 4-5 раз. Поддерживайте равномерную скорость и давление на кожу, чтобы создать больше микроканалов. Прокатите валик не менее 4 раз в 4 направлениях по коже, которая нуждается в уходе. Используйте насадку на 27 игл для местного ухода за кожей. Применяйте штампующие движения. Нанесите на кожу сыворотку или маску, чтобы успокоить кожу и предотвратить воспаление. Поместите ледяной валик в морозильную камеру и дайте ему замерзнуть. А затем насладитесь охлаждающим воздействием на лицо или тело.

Предостережения:

- Не используйте роликовую головку повторно без тщательной спиртовой обработки.
- Следите за тем, чтобы микроиглы всегда были чистыми.
- Храните набор в недоступном для детей месте.
- Не делитесь насадками с другими людьми в целях гигиены.
- Не используйте дольше, чем указано выше, на одном участке кожи.
- Приостановите использование и проконсультируйтесь с врачом, если возникла гиперчувствительная реакция.