

## **ПРИБОР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УГРЕЙ**

---

Руководство по  
эксплуатации

---

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора и сохраните его для использования в будущем.

# Функции



## Микрокристаллическое разглаживание кожи

Зонд с микрокристаллическими частицами имеет большую площадь поверхности с высокой адсорбцией. Этот зонд может массировать и отшелушивать частицы не повреждая кожу.



## Экстракция угрей, подтяжка кожи

Большой круглый зонд обладает большой силой всасывания. Лучше всего его использовать для избавления от жирных пятен и черных точек. Он имеет уникальный механизм, который использует вакуумное давление для массажа кожи с помощью микролифтинга, глубоко воздействующего на глубокие слои кожи. Стимулирует работу микроциркуляции, способствует циркуляции крови и лимфы, позволяет коже снова омолаживаться.



## Очищение пор

Всасывание маленького круглого зонда слабее. Поместите круглое отверстие на черные точки, чтобы удалить их. Если кожа поранилась или опухла, использовать прибор не рекомендуется. Если угорь находится глубоко в порах, используйте зонд большего размера. Этот зонд небольшого размера больше подходит для чувствительной кожи.



## Гладкие тонкие линии

Этот специальный овальный зонд предназначен для микротягивающего массажа уголков глаз, носа, рта и других участков с тонкими линиями, за которыми трудно ухаживать, или для чувствительной кожи. Он стимулирует микроциркуляцию, предотвращая появление морщин.

# Полезная информация

- 1 Функция подтяжки формирует и стягивает кожу, что может привести к появлению травм или рубцов. Мы не рекомендуем слишком долго держать зонд на одном и том же месте. Обычно хватает 3-5 секунд.
- 2 Мы рекомендуем использовать зонд с микрокристаллическими частицами в зависимости от типа вашей кожи: один раз в неделю для сухой кожи, два раза в неделю для жирной кожи, и не более 5 минут за один раз для каждого типа.
- 3 Не прижимайте зонд к коже очень плотно; устройство обладает большой силой всасывания;
- 4 После ухода за кожей, может ощущаться легкое покалывание и покраснение из-за усиления кровообращения. В зависимости от вашего типа кожи, покраснения исчезнут примерно через 0,5-24 часа;
- 5 Уделяйте больше внимания увлажнению и уходу за загаром после ухода за кожей;
- 6 Не используйте крем-скраб или отшелушивающее средство до или после ухода за кожей.

# Принцип действия

## Функция разглаживания и подтяжки кожи

После очищения лица откройте поры с помощью горячего полотенца или водяного пара. Кожа лица перед использованием должна быть сухой;

- 1 Установите микрокристаллический или большой зонд;
- 2 Начните с подбородка и перемещайте прибор снизу вверх;
- 3 Используйте прибор на щеках и перемещайте его изнутри наружу;
- 4 Используйте прибор в области лба и перемещайте его от центра в стороны;
- 5 Используйте прибор в Т-зоне и перемещайте его снизу вверх.

## Очистите поры


- 1 Смените зонд на большой или маленький круглый зонд (в зависимости от типа кожи);
- 2 Поместите круглое отверстие на черные точки, чтобы удалить их. Уровни можно менять в соответствии с вашими потребностями;

Метод: при работе с угрями, двигайтесь медленно в том же направлении. Повторите несколько раз, избегая покраснения кожи. Не останавливайте прибор на одном месте слишком долго.

## Гладкие тонкие линии


Установите овальный зонд, используйте его в уголках глаз, носа, рта и других областях, где легко появляются тонкие линии. Уровни можно менять в соответствии с вашими потребностями;

Метод: всасывание в нужных областях для разглаживания тонких морщинок, быстрое и мягкое удаление снова и снова. Он стимулирует микроциркуляцию, предотвращая появление морщин.

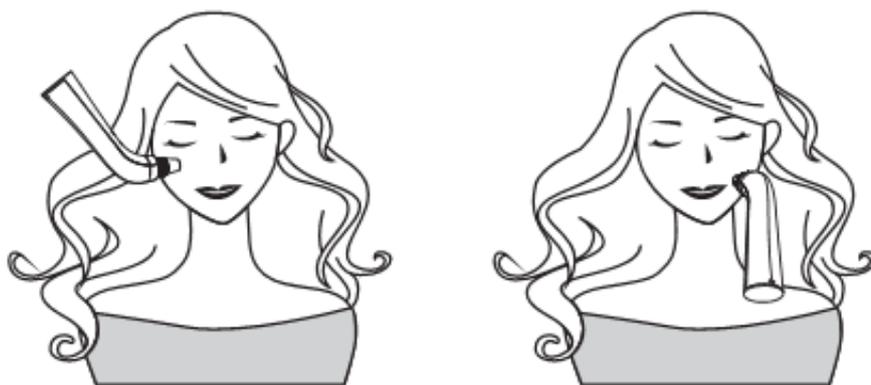

(Внимание: не всасывайте все время одну и ту же область, это может привести к опуханию кожи. Если кожа опухла, немедленно прекратите использование прибора.

## Характеристики прибора

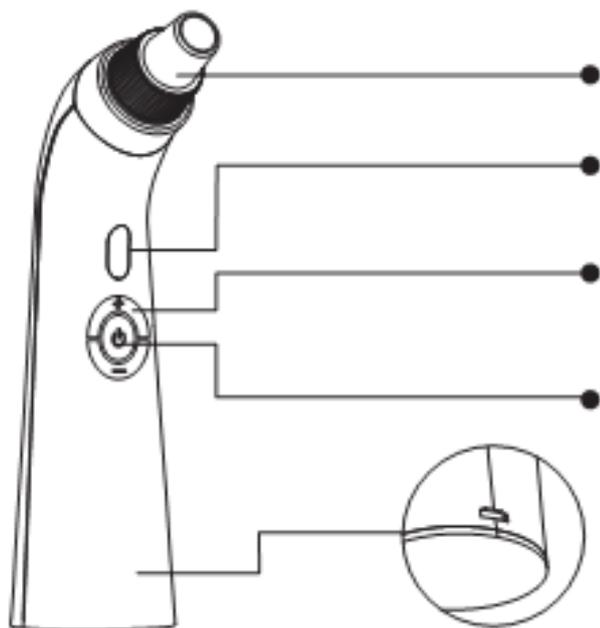

возможность смены рабочего зонда

Светодиодный дисплей: показывает оставшийся заряд и уровни мощности всасывания

Кнопка управления интенсивностью всасывания

Кнопка включения и выключения

Разъем USB для зарядного устройства

## Места использования прибора

Микрокристаллический зонд:

Любая область лица, кроме области вокруг глаз. Также подходит для локтей, колен и щиколоток.

Большой круглый зонд:

Любая область лица, кроме области вокруг глаз

Маленький круглый зонд:

Чувствительные области, такие как область вокруг глаз или любые другие области лица.

Овальный зонд:

Чувствительные области, такие как область вокруг глаз или любые другие области лица.

## Внимание:

- 1 Вытрите руки насухо перед использованием прибора. Вода может попасть в прибор через отверстие для выхода воздуха, что приведет к его повреждению;
- 2 Перед использованием убедитесь, что губка помещена в чашку фильтра. Губка должна быть сухой, иначе жидкость повредит прибор;
- 3 Не мойте прибор;
- 4 Данный прибор не предназначен для использования людьми с физическими или умственными недостатками или людьми с недостатком опыта и знаний (включая детей) без присутствия ответственного родителя или опекуна.
- 5 Данный прибор не подходит для частей тела, подвергшихся косметической хирургии или ринопластике. Данный прибор нельзя использовать беременным женщинам и людям с сердечными заболеваниями.