

"HYPER IMPACT" "ELITE"

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за использование прибора.
Перед использованием прибора, внимательно прочитайте инструкцию.
Просим вас хранить это руководство для его использования в дальнейшем.

• Руководство по безопасности •

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, за исключением случая, когда они находятся под надзором лица, отвечающего за их безопасность, и получили соответствующий инструктаж по использованию прибора.
- Необходимо следить за детьми, не допуская их игр с прибором.
- Для снижения риска электротравмы, возгорания, а также травмирования людей, данное изделие должно использоваться в соответствии со следующими инструкциями. Пользоваться прибором могут только взрослые.
- Для того, чтобы исключить повреждение прибора и травмы пользователя, не прикасайтесь головку прибора непосредственно к коже. Нажатие на прибор и перемещение массажной головки должны выполняться легкими движениями. Не следует массировать одну и ту же мышцу дольше 60 секунд.
- Рекомендуется не включать максимальные уровни скорости и давления при массаже головы или любых частей тела с выступающей костью.
- Выбирайте массажную головку в соответствии с особенностями массажа конкретной части тела.
- В случаях, когда из-за частого сильного давления на высокой скорости на одну и ту же мышцу возникают синяки, боль и недомогание, немедленно прекратите использование прибора.
- Следите за тем, чтобы пальцы, волосы, глаза, любые части тела, на которых и имеются волосы, не соприкасались с телескопическим стержнем устройства и не попадали в охлаждающие отверстия на задней панели двигателя, чтобы и исключить их застревание.
- Не помещайте никаких предметов в отверстия, предназначенные для охлаждения прибора.
- Не допускается погружать прибор в воду. Не допускайте попадания воды в отверстия для охлаждения: через них вода может попасть в двигатель.
- Прибор следует утилизировать в установленном порядке. Не допускается использование прибора способами, не указанными в инструкции.
- Для зарядки используйте только предусмотренное для прибора зарядное устройство.
- Каждый раз перед использованием следует тщательно проверять оборудование.
- Не вносите в устройство прибора никаких изменений.
- Не включайте и не заряжайте прибор в помещениях, где в это время отсутствуют люди.

2

- Всегда держите прибор подальше от детей. ПРИБОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИГРУШКОЙ. Во время использования прибора необходимо следить за детьми, не допуская их шалостей с Vistara Hyper Impact Elite.

• Предостережения •

1. Не погружайте прибор в воду, держите его подальше от мест, где на него могут попасть жидкости, и от источников тепла, исключите попадание пыли и мусора в вентиляционные отверстия устройства.
2. Ни при каких обстоятельствах не допускается разбирать изделие.
3. Не используйте прибор непрерывно более 45 минут, может произойти активация устройства защиты от перегрева, и прибор автоматически выключится. В этом случае перед повторным использованием требуется подождать не менее 30 минут до остывания прибора.
4. После завершения зарядки или перед использованием следует отключить от прибора зарядное устройство. Применение устройства во время его зарядки не допускается.

• Предостережения •

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, за исключением случая, когда они находятся под надзором лица, отвечающего за их безопасность, и получили соответствующий инструктаж по использованию прибора.
- Прибор не является игрушкой. Не оставляйте прибор в местах, доступных детям.
- Тщательно проверяйте прибор и его элементы, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
- Не используйте прибор, если какие-либо его элементы повреждены или если прибор функционирует ненадлежащим образом. Не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно, просим обращаться для ремонта к агенту специализированной сервисной службы.
- Любые виды технического обслуживания могут выполняться только квалифицированным специалистом из сервисной организации.
- Будьте предельно внимательны, когда во время использования прибора рядом находятся дети или люди с ограниченными возможностями здоровья. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Храните устройство в сухом и прохладном месте.
- Допускается использовать прибор исключительно в соответствии с описанием в руководстве: любое небрежное обращение или использование не по назначению может привести к неисправности.
- Всегда читайте этикетки. Использовать исключительно в соответствии с инструкциями. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.


3

- Перед применением прибора проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Внимательно прочитайте руководство. Используйте изделие только по назначению, в соответствии с описанием в данном руководстве. Производитель и дистрибутор не несут ответственности за неправильное использование прибора.
- Прибор не должен использоваться как замена профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. Использование изделия осуществляется вами на ваш собственный страх и риск.
- Если во время использования прибора поблизости находятся дети или лица с ограниченными возможностями здоровья, за ними необходимо тщательно следить.
- Не использовать при наличии болевого синдрома. Никогда не массируйте области тела, где наблюдается отечность, воспаление или кожные высыпания.
- Не допускается проводить процедуры с использованием прибора для лиц младше 18 лет.
- Не используйте устройство на участках кожи с пониженной чувствительностью или при плохом кровообращении.
- Устройство не предназначено для использования в медицинских целях. Прибор предназначен только для проведения массажа.
- Устройство предназначено только для взрослых.
- При проведении процедуры с использованием прибора кожа должна быть сухой. Можно выполнять массаж поверх одежды, слегка надавливая и перемещая массажер по телу в течение примерно 60 секунд на каждую область.
- Используйте на мягких тканях тела только при комфортных ощущениях, прекратите процедуры, если они вызывают боль или какой-либо дискомфорт.
- Не используйте прибор для проведения процедур на голове или на любых других участках тела, где выступают кости.
- Используйте только аппликаторы/массажные головки/дополнительные элементы, поставляемые вместе с прибором.
- Не используйте посторонние дополнительные элементы.
- Большое давление при проведении процедуры может привести к появлению синяков. Постоянно следите за состоянием области, на которую оказывается воздействие в ходе процедуры: остановитесь, заметив любые признаки дискомфорта.
- Следите за тем, чтобы волосы, пальцы и любые другие части тела не соприкасались со стержнем и задней стороной аппликатора, так как это может привести к защемлению.
- Не вставляйте и не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия прибора.
- Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.
- Не допускайте падения прибора.
- Заряжайте прибор только с помощью прилагаемого зарядного устройства.
- Не оставляйте без присмотра включенный или поставленный заряжаться прибор.
- Не допускается использовать прибор во время его зарядки.
- Не используйте устройство непрерывно в течение более 30 минут, поскольку при этом может активироваться система защиты от перегрева, и прибор автоматически отключится.

4

• Детали и дополнительные элементы •

- Основное изделие -

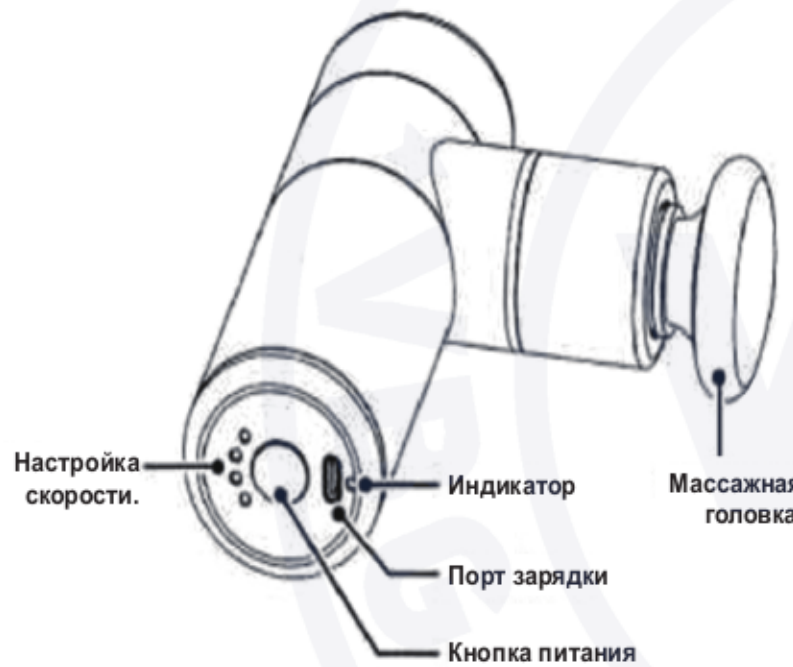

5

- Массажная головка -



6

• Способ применения •

• УСТАНОВКА/ЗАМЕНА МАССАЖНЫХ ГОЛОВОК

Выберите массажную головку в соответствии с типом массажа, вставьте ее в круглое отверстие в передней части массажера.



• УСТАНОВКА



Удерживанием нажатой кнопки питания в течение 3 секунд вы можете в любое время включить или выключить устройство.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

7

• ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ

После включения питания нажатием кнопки ON нажмите кнопку Power, чтобы изменить настройку скорости.

Загорится световой индикатор, сообщающий об используемом скоростном режиме.

• ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Используется прилагаемый к прибору шнур питания. Зарядите устройство, вставив зарядное устройство в слот USB типа C.

Красный светодиодный индикатор указывает на то, что прибор заряжается. После завершения зарядки загорится зеленый свет светодиодного индикатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство автоматически отключается при падении напряжения ниже 10 В, поскольку срабатывает защита от низкого напряжения.



8

• Обслуживание •

НЕ оставляйте прибор вблизи источника тепла или в жаркой среде.

- Устройство должно храниться в сухом месте.
- Не оставляйте устройство подключенным к сети после полной зарядки и не доводите его до полной разрядки, так как это приводит к повреждению аккумулятора.
- Для очистки прибора используйте только сухую ткань.

Указатель	Параметр
Рабочее напряжение	3 литиевые батареи
Рабочий ток	Меняется в соответствии с фактической нагрузкой
Максимальный ток	Около 3,5 А
Энергопотребление в режиме ожидания	<20 мкА
Ток заряжения	650 мА
Рабочая температура	-10°C -60°C
Габариты изделия	13,5 X 4,6 X 8,8 см

ООО «ВБГ Косметик»
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2,
Бизнес-парк Румянцев, корпус Г, офис 509Г.
+8 (800) 200-57-09
+7 (499) 113-40-58
www.vbg-cosmetic.ru

9