

Dr. pen A6S РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, прочтите руководство перед использованием

Основной прибор



Детали



Беспроводной режим
Прибор, работающий от аккумуляторной батареи
Проводной режим
Прибор, работающий от переменного тока



Правила использования

- Подготовка**
1. Достаньте картридж из стерилизованной упаковки.
 2. Сопоставьте разъем 1 и разъем 2, надавите на картридж горизонтально до конца.
 3. Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.
 4. Поверните картридж по часовой стрелке, а затем выдвиньте горизонтально, если хотите его извлечь.



5. Включение/выключение Dr. pen A6S
Удерживайте кнопку питания в течении 3-5 секунды, чтобы запустить или выключить устройство.

Внимание
Чтобы защитить прибор от попадания влаги, не переворачивайте его вверх картрижем, во время использования, чтобы предотвратить обратный поток жидкости.

Правила использования

Регулировка длины
Отрегулируйте глубину, поворачивая кольцо регулировки шкалы.
Поверните его по часовой стрелке, глубина уменьшится.
Поверните его против часовой стрелки, глубина будет больше.




Экран отображения скорости



Регулировка скорости

Скорость меняется один раз, при каждом нажатии кнопки изменения скорости.

Виды картриджей (преобретаются отдельно)

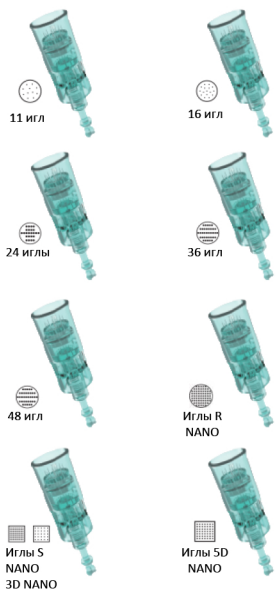

Характеристики

Товарное наименование: Прибор для микромассажной терапии с помощью вибрации.
Наименование модели: Dr. pen A6S
Адаптер: 5 В-1000 мА
Вес упаковки: 425 г
Размер упаковки: 169*123*56 мм

Комплектация

Позиция	Количество
Аппарат	1 шт.
Блок Питания	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Адаптер для работы от сети	1 шт.
Адаптер зарядки аккумулятора	1 шт.
Аккумулятор	2 шт.
Картридж	2 шт.

Предостережение

- Пожалуйста, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед использованием прибора и следуйте инструкциям.
- Противопоказания:**
 1. Острые заболевания, сопровождающиеся температурой выше 38°С и заболеваниями крови (в т.ч. гемофилия);
 2. Аллергическая реакция
 3. Меланом на лице
 4. Наличие хронических заболеваний, требующих длительного лечения
 5. При длительном приеме лекарственных препаратов проконсультируйтесь с лечащим врачом о возможности использования перед началом процедур
 6. Возраст до 18 лет
- Не подключайте прибор к питанию, отличному от 220В переменного тока. Это может привести к неисправности.
- Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (возле увлажнителя или в ванной). Это может привести к неисправности.
- Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.
- Не прикасайтесь к устройству и не отсоединяйте шнур питания мокрыми руками. Это может привести к порезам и порезам электрическим током.
- Не используйте оголенный или поврежденный шнур. Это может привести к пожару (обязательно замените его на новый).
- Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или задиры. Они могут оцарапать кожу.
- Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от розетки.
- Обязательно пройдите технический контроль для проверки. Если обнаружены какие-либо неисправности, отремонтируйте прибор.
- Никто, кроме пользователя, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.

Гарантия

Гарантийный срок Dr. Pen A6S составляет 12 месяцев. Мы предлагаем ремонт нашей продукции со дня её покупки. Если какой-либо из наших продуктов имеет повреждения или «естественные» проблемы - предлагаем ремонт или замену.

Общее техническое обслуживание

Обязательно осмотрите устройство и адаптер перед использованием.

Держите устройство выключенным. Протирайте его поверхность сухой тканью.

Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.

Не доверяйте измерение, ремонт или переделку устройству непрофессионалу.

Если вы не использовали устройство в течение длительного времени, убедитесь, что оно работает должным образом и безопасно.

Переменный ток	SN	Серийный номер
Постоянный ток	ЕС РЕР	Представитель в ЕС
Оборудование класса I	CE	Маркировка CE
Внимание, обратитесь к сопроводительной документации		Производитель
Дата изготовления	F	Независимая рабочая часть

Dr. pen A6S РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ